


レスピマット（ソフトミストインヘラー）

操作 薬剤のセット等

1. 薬剤のセットをする。


- ① キャップを閉じた状態で、安全止めを押しながら透明ケースを外し、カートリッジを本体に挿入する。

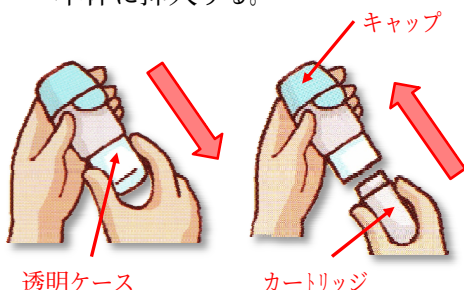

透明ケース

カートリッジ

- ② 固い台の上などでカートリッジを垂直にして「カチッ」と音がするまでゆっくり押しこみ、透明ケースを戻す。

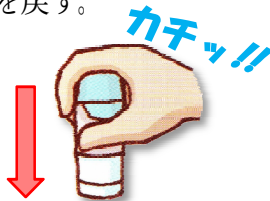

カチッ!!

- ③ キャップを閉じた垂直の状態で透明ケースを「カチッ」と音がするまで時計回りに180度回転させ、キャップを開ける。




ポイント

- 吸入器を最初に使う時は、下向きに4回空噴射が必要です。
- 上向きに噴射して、誤って薬剤が目に入ると副作用の原因になります。



吸入前

2. 吸入前に息吐きをする。

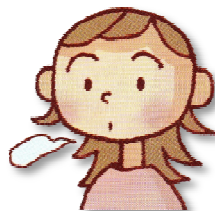



ポイント

- 吸入口に息を吹きかけると、中の薬剤が湿気てしまいます。

吸入

3. 吸入する。

吸入口を軽く噛んで唇で覆い、ボタンを押すと同時にゆっくり深く吸い込む。

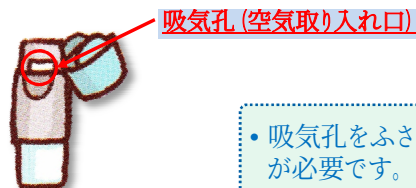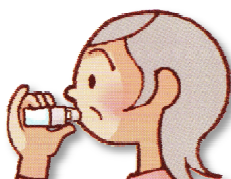

吸気孔(空気取り入れ口)


ポイント

- 吸気孔をふさがないように注意が必要です。

吸入後

4. 吸入後、息止めおよび息吐きをする。

苦しくない程度に3～5秒息を止め、ゆっくり息を吐きだす。

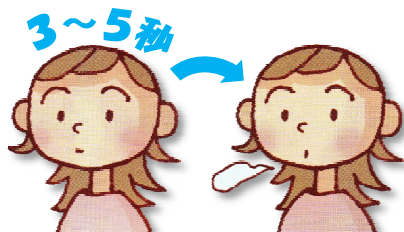

3～5秒

ポイント

- 息止めは肺への薬剤の沈着を待つために必要です。

5. うがいをする。(2回以上)



吸入器の管理 残薬管理含

6. カウンターのチェック(残数の確認)

カウンター「0」で終了です。透明ケースが回転できなくなります。



<吸入可能回数> 60回・30日

← カウンター「0」

ポイント

- 常温で保存します。

7. 吸入器の手入れをする。

マウスピースを拭き取るのみで、水洗いは不可。

ポイント

- 薬剤を手で触れた場合は、副作用予防の為、手洗いが必要です。