

# タービュハイラー（ドライパウダー）パルミコート

## 操作 薬剤のセット等


### 1. キャップをはずし、薬剤のセットをする。

- ① **吸入器を垂直に立てた状態で、回転グリップを「クルッ」と反時計回りに止まるまで**回す。
- ② 回転グリップを**時計回りに「カチッ」と音がするまで**戻す。

- 「クルッ」と「カチッ」の動作で1回分の薬剤がセットされます。
- 吸入器を横にすると薬剤が正しくセットされません。



- 開封時のみ下記一連の空操作を2回行います。

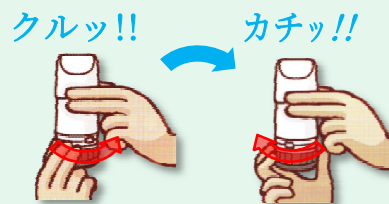

## 吸入前

### 3. 吸入前に息吐きをする。



- 吸入口に息を吹きかけると、中の薬剤が湿気てしまいます。

## 吸入

### 4. 吸入する。

吸入口をすき間なくわえ、**胸いっぱい**に**深く**吸い込む。




吸気孔 (空気取り入れ口)

- 側面の**吸気孔をふさがない**ように注意が必要です。

## 吸入後


### 5. 吸入後、息止めおよび息吐きをする。

苦しくない程度に3～5秒息を止め、ゆっくり息を吐きだす。

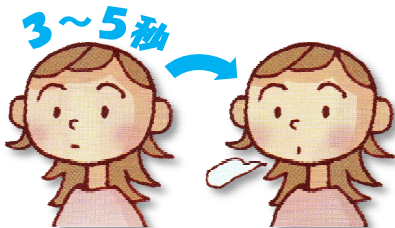

### 6. 吸い残しのチェックをする。

チェック用ハンカチを使って再度吸入し、ハンカチに薬剤が付かないが確認する。

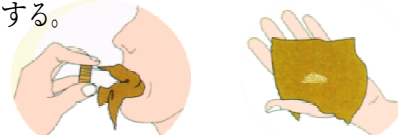

- 吸った感じがせず、不安に思われた時もチェック用ハンカチでチェックができます。

### 7. **うがい**をする。(2回以上)



- 息止めは肺への薬剤の沈着を待つために必要です。

- 口腔内の副作用予防のために重要です。

## 吸入器の管理 （残薬管理含）

### 8. 残量の確認をする。

小窓の**赤い表示が小窓の下部**についたら終了です。



残り約20回分



終了

- 吸入器を振ると「カサカサ」音しますが、これは乾燥剤の音です。

### 9. 吸入器の手入れをする。

- ① 水洗いは不可。
- ② マウスピースを乾いた布で拭く。

- 吸入器の中へ水が入ってしまうと薬剤が湿気てしまいます。


# タービュハイラー（ドライパウダー）シムピコート・オーキシス

## 操作 薬剤のセット等


### 1. キャップをはずし、薬剤のセットをする。

- ① 吸入器を垂直に立てた状態で、回転グリップを「クルッ」と反時計回りに止まるまで回す。
- ② 回転グリップを時計周りに「カチッ」と音がするまで戻す。

- 「クルッ」と「カチッ」の動作で1回分の薬剤がセットされます。
- 吸入器を横にすると薬剤が正しくセットされません。

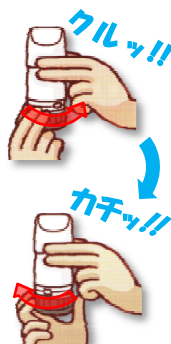

- 開封時のみ「カチッ」を3回行います。  
※空操作と左記薬剤のセットとは回転が逆になりますので、注意が必要です。

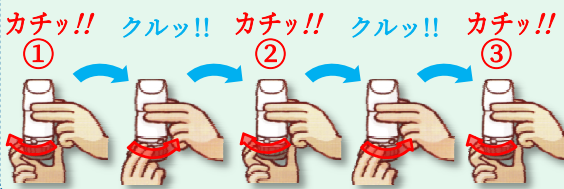

## 吸入前

### 3. 吸入前に息吐きをする。




- 吸入口に息を吹きかけると、中の薬剤が湿気てしまいます。

## 吸入

### 4. 吸入する。

吸入口をすき間なくわえ、胸いっぱい深く吸い込む。

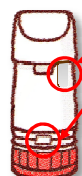


吸気孔 (空気取り入れ口)

- 側面の吸気孔をふさがないように注意が必要です。

## 吸入後

### 5. 吸入後、息止めおよび息吐きをする。

苦しくない程度に3～5秒息を止め、ゆっくり息を吐きだす。

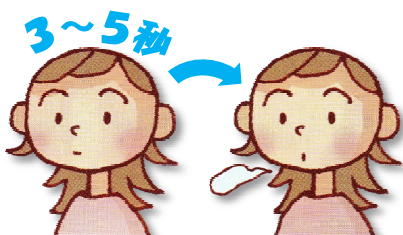

- 息止めは肺への薬剤の沈着を待つために必要です。

### 6. 吸い残しのチェックをする。

チェック用ハンカチを使って再度吸入し、ハンカチに薬剤が付かないが確認する。



- 吸った感じがせず、不安に思われた時もチェック用ハンカチでチェックができます。

### 7. うがいをする。(2回以上)




- 口腔内の副作用予防のために重要です。

## 吸入器の管理 （残薬管理含む）

### 8. カウンターのチェックをする。(残量の確認)

小窓の中央に「0」が表示されたら終了です。

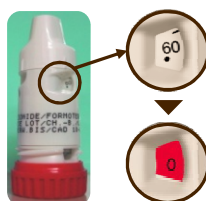

終了

- 吸入器を振ると「カサカサ」音がありますが、これは乾燥剤の音です。

### 9. 吸入器の手入れをする。

- ① 水洗いは不可。
- ② マウスピースを乾いた布で拭く。

- 吸入器の中へ水が入ってしまうと薬剤が湿気てしまいます。